


MI52-N产品参数

倒置显微镜MI52-N规格参数	
项目	规格
目镜	大视野WF10X/22mm，对中望远镜，单个屈光度可调
目镜筒	45°倾斜，瞳距调节53-75mm，视度可调
物镜	平场消色差物镜 4X
	长工作距离平场消色差相衬物镜 10X/20X PH
	长工作距离平场消色差物镜 40X
调焦机构	粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值2 μm，调焦行程11mm
物镜转换器	五孔内定位转换器，有防霉装置
载物台	固定载物台尺寸227×208mm，机械式移动，移动范围：135×77mm
	圆形透明载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm
	培养皿托板 内槽尺寸：86mm×129.5mm，可适配圆形培养皿φ90mm
	配备万用样品夹：外尺寸128mm×86mm：内槽规格:82mmX56mm，77mmX33mm，77mmX26mm，也可适配φ35mm、φ50mm、φ60mm、φ68mm培养皿
透射照明系统	推拉板式相差聚光镜，工作距离55mm，数值孔径：0.42
	9W LED，亮度连续可调
	滤色片
相差环板	10X相差环1个、20X/40X相差环共用1个
相机接口	C接口，不含相机
尺寸	486×255×537（单位mm，长×宽×高）
可选配件清单	
荧光观察	三色数显LED荧光模块
物镜	长工作距离平场半复消色差相衬物镜 10X/20X/40X PH
	长工作距离平场消色差物镜 10X/20X
	长工作距离平场消色差相衬物镜 40X PH
载物台	翻转板

MI52-N尺寸图

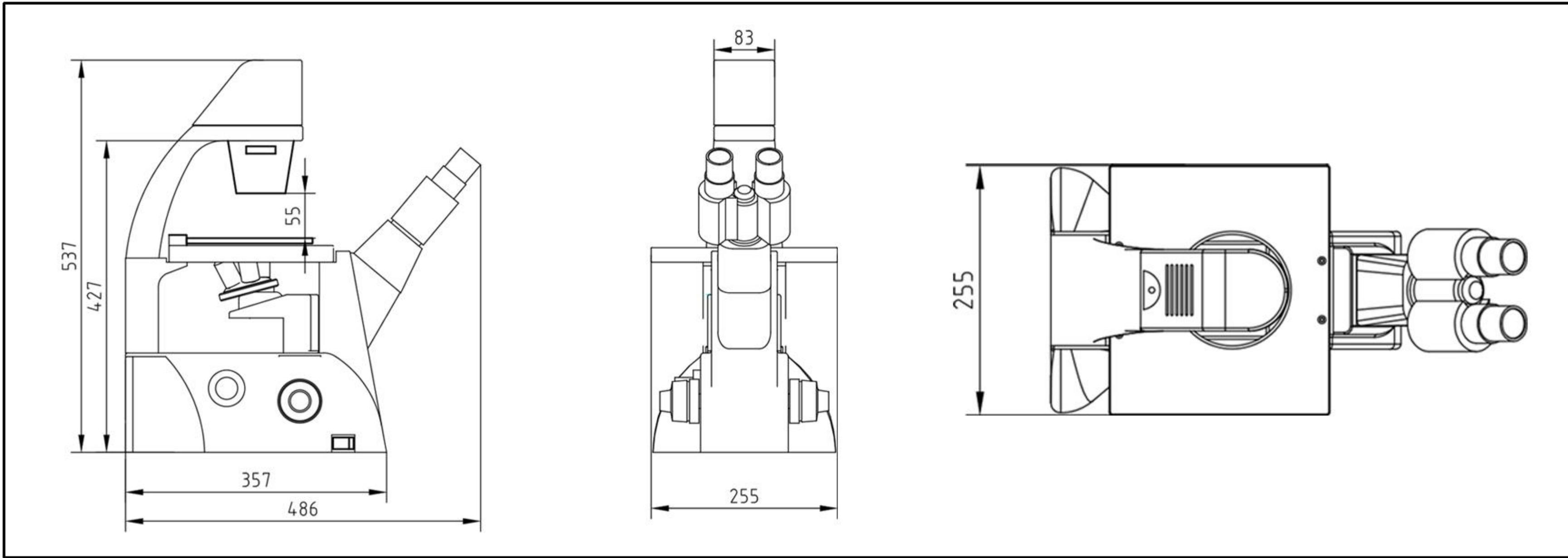

Mshot 明美
广州市明美光电技术有限公司
Guangzhou Micro-shot Technology Co.,Ltd.

地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506房
联系电话：020-38250606
网址：www.mshot.com
邮箱：mshot@mshot.com
QQ号：505506350



扫码了解更多

*任何规格和外观的改变，恕不另行通知，请以实物为准



CY250624

Mshot 明美

倒置显微镜MI52-N



倒置显微镜MI52-N

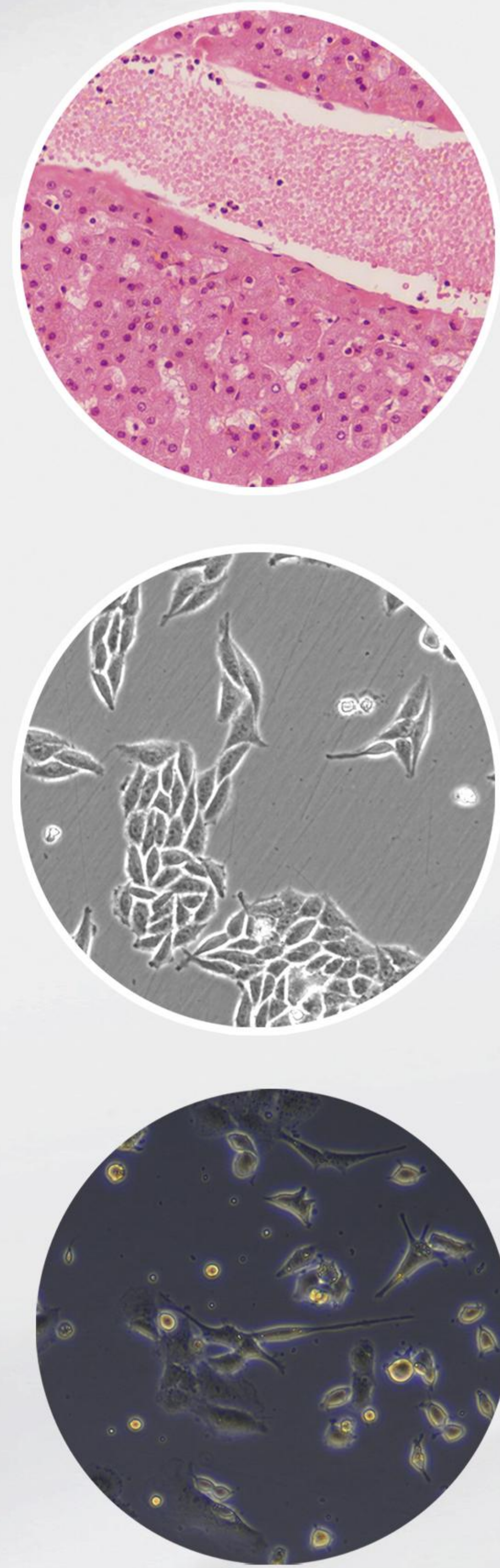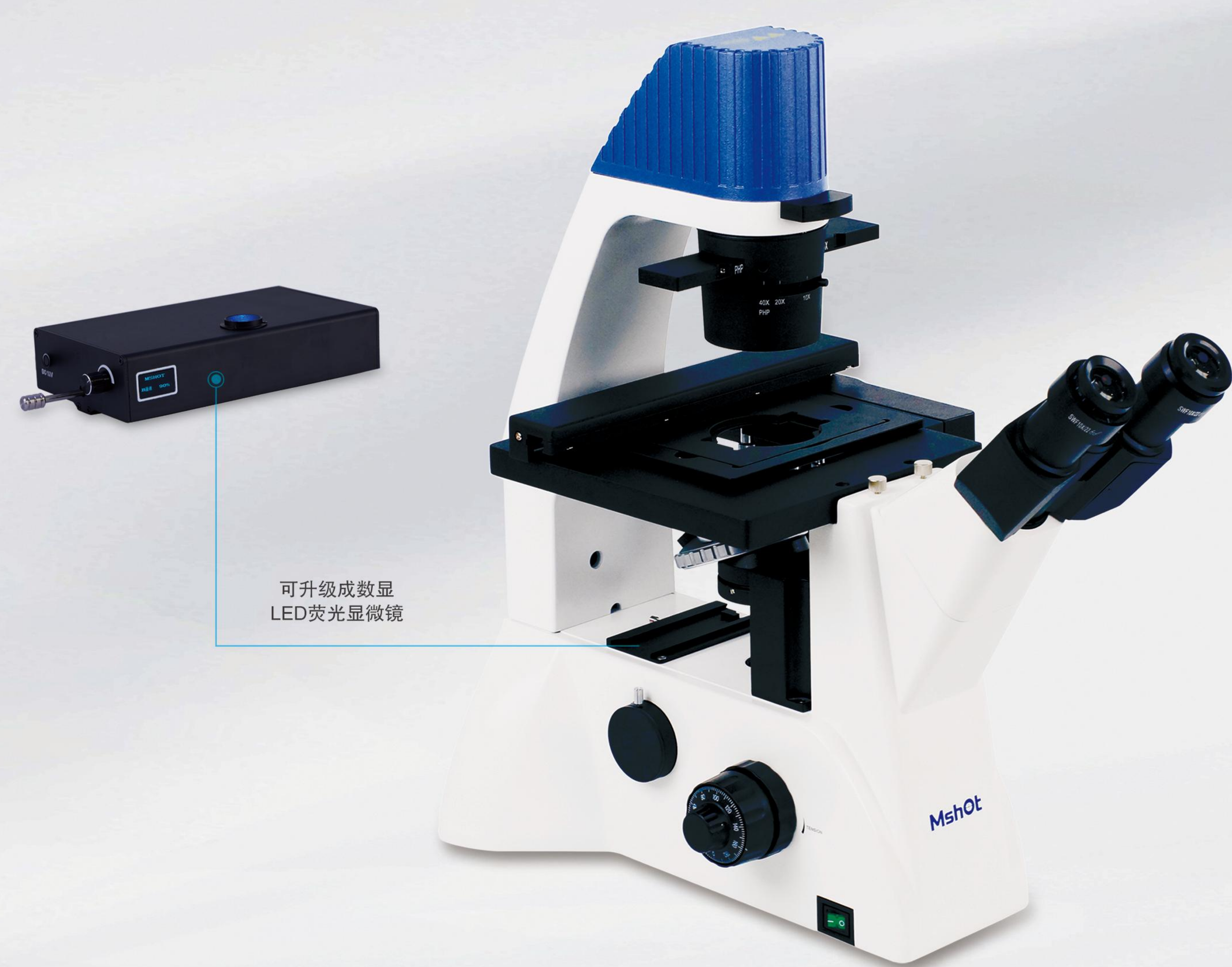

01/ 铰链式双目观察头

45° 倾斜，最佳舒适度倾斜角，符合人体工程学设计；铰链式设计，53-75mm瞳距范围可调，适合不同用户需求。




02/ 大视野高眼点目镜

22大视场目镜，镜下视野平展宽广，减少长时间工作造成的眼睛疲劳；高眼点设计，无需摘眼镜也可观察；屈光度可调，保证双目镜下同步清晰。



03/ 支持相衬的LED光源

长寿命高亮度LED光源，稳定均匀明亮不刺眼，通过机身侧边旋钮，可连续调节光强，使视野图像保持最佳状态；推拉式相衬环板，支持相衬观察。

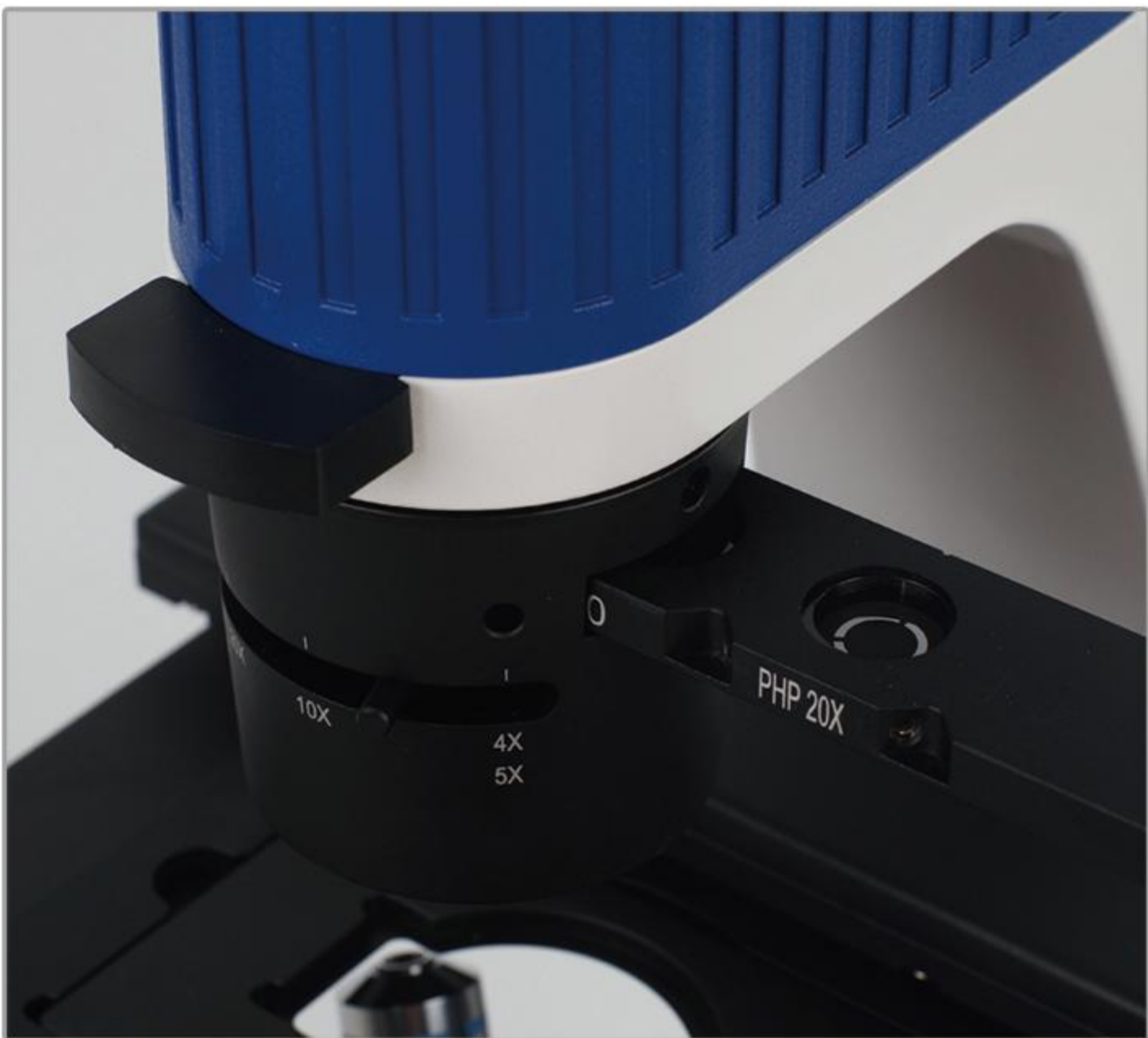


04/ 内置侧身式相机接口

内置接口，适配主流相机型号；底部左侧安装，空间布局更合理，为细胞观察提供更多操作空间。



05/ 一体化主机设计

主机一体化设计，结构紧凑小巧，可放置在超净工作台与狭小细胞房；背部手提设计，移动搬运更方便。

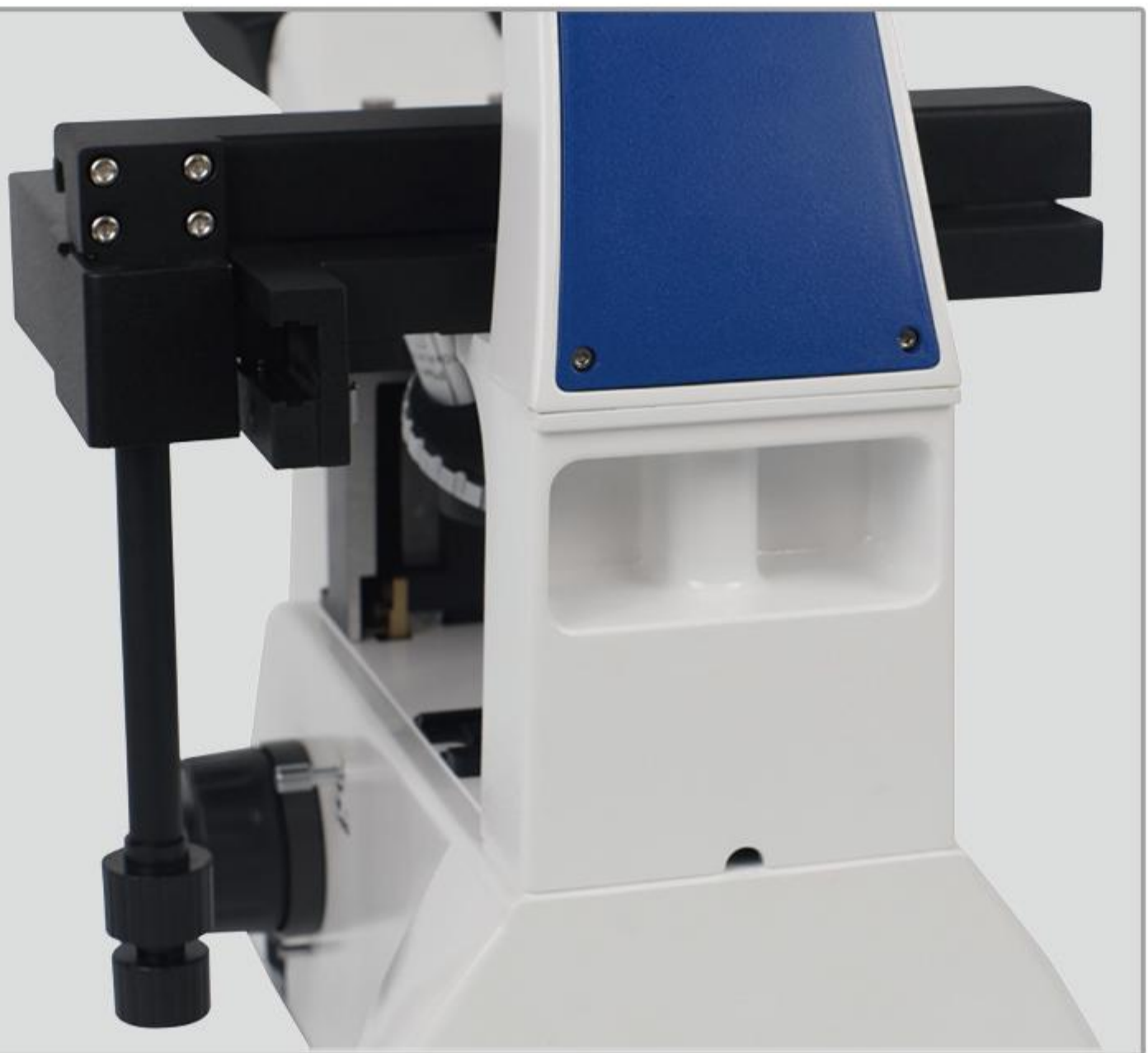

06/ 快拆式样品夹

配备培养皿托板和万用样品夹，以适配不同培养皿，样品夹可独立快速安装拆卸，轻松腾出平整的载物台空间以放置特殊形状的培养皿。

